

VIILENTÄVÄ POLVITYYNY

magneeteilla

Viilentävässä polvityynyssä yhdistyvät parantava kylmä-terapia ja vahvat magneetit. Polvityyny on kätevä, pieni ja monikäyttöinen - nivelille, selkään, vatsaan ja niskaan. Täydellinen kotona ja matkalla!

+ Viilentää pieniä haavoja

+ Helpottaa kipua

+ Laskee turvotusta



Magneetit ihoa kohden



Polvi

Kävelyä, hyppyä, loikkia, juoksua – polvi altistuu joka päivä erilaisille rasituksille. Urheiluvammojen lisäksi esim. nivelrikko ja reuma voivat aiheuttaa kipua polviin.




Ranne

Käsi on todellinen ihmekalu. Nivelten, lihasten, jänteiden, nivelsiteiden ja hermoston erittäin monimutkaisen yhteistyön ansiosta käsi on hyvin monikäyttöinen ja ihmiselle lähes välttämätön työkalu. Toki sen jatkuvan käytön riskinä on suuri loukkaantumisvaara.



Kyynärpää

Kyynärpää on mukana jokaisessa käsivarren liikkeessä. Yksipuolinen kuormitus, kuten golfiin tai tenniksen pelaaminen, sepän-, puusepän- tai maalaustyöt aiheuttavat usein ärsytystä käytössä olevaan kyynärpäähän.

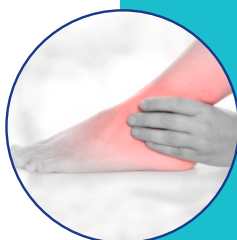

Nilkka

Nilkka on kehomme eniten rasituksessa oleva nivel. Se kantaa jokaisella askeleella painomme neli-viisinkertaisesti. Siksi kärsimme usein nilkan vaivoista.

Tuotekuvaus:

MAGNETIX viilentävä polvityyny (9 x 9 cm) tuo nopean avun kipuun, turvotukseen ja pieniin haavoihin. Se soveltuu erittäin hyvin niin kylmä- kuin lämpöterapian (vesihaude) käyttöön. Pyöreä reikä tyynyn keskellä

mahdollistaa ilman kierron pienessä haavassa. Pehmeä puuvillapäällinen suojaa ihoa kylmältä ja kuumalta. Päällisen joustavat silmukat helpottavat tyynyn kiinnitystä kehoon.

- Pyöreä ilmankiertoaukko
- Ihoystävällinen puuvillapäällinen
- 3 vahvaa neodyymimagneettia (1 200 gaussia)



MAGNETIX
WELLNESS

Käyttöohjeet:
Tietoa käyttäjälle

OLE ROHKEA!

Viilentävä polvityyny



Materiaali: PVC, sininen geeli
Koko: 9 x 9 cm
Päällinen: 100 % puuvilla
3 neodyymimagneettia (1 200 gaussia)



Käyttö:

MAGNETIX viilentävää polvityynyä käytetään kylmäterapia-hoitoihin, mutta se sopii erittäin hyvin käytettäväksi myös lämpöterapiaan. Tyynyä voidaan käyttää yhä uudelleen ja se on helppokäyttöinen.



Kylmähoito*

- Pienet haavat
- Kipu
- Päänsärky
- Turvotus kosmeettisen kirurgian jälkeen
- Mustelmat + ruhjeet
- Hyönteisten puremat
- Nyrjähdykset
- Pienet palovammat
- Hammassärky
- Tulehdus
- Tenniskyynärpää
- Nenäverenvuoto

Käyttöohjeet kylmäpakkauksena:



Laita jääkaappiin tai pakastimeen **1 tunti** ennen käyttöä. Käytön jälkeen pakkausta voidaan säilyttää pakastimessa ja siten se on aina käyttövalmis.

Lämpöhoito*

- Jännittyneet lihakset
- Särkevät nivelet
- Kylmettyneet jäsenet
- Kipeät lihakset
- Kuukautiskivut
- Urheilusuorituksen valmistautuessa
- Edistää paikallista verenkiertoa

Käyttöohjeet lämpöpakkauksena:



Laita tuote 6 minuutiksi vesihauteeseen (enintään 50 °C).
Huomio: Ylikuumeneminen voi rikkoa pakkauksen.
Ei sovi lämmitettäväksi mikroaaltouunissa!

* Nämä suositukset eivät korvaa lääkinnällistä hoitoa.



Saatavana myös:
Viilentävä tyyny
Viilentävä otsapanta



Varoitus: Älä käytä alle 3-vuotiaalle lapselle. Mikäli sinulla on valtimoiden verenkiertohäiriö, yliherkkyys, akuutti sydän- ja verisuonitauti, keskustelee käytöstä lääkärin kanssa. Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Geeli on biologisesti hajottavaa ja myrkytöntä. Pidä geelityyny pois lasten ulottuvilta. Mikäli lapsi tai aikuinen on nielassut geeliä,

ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Vioittunutta tuotetta ei pidä käyttää. Kuuma metalli ei saa joutua kosketuksiin tuotteen kanssa (esim. kattilan pohja). Ei sovi lämmitettäväksi mikroaaltouunissa. Voidaan hävittää kotitalousjätteiden mukana.

Huomio: Vain ulkoiseen käyttöön!

MAGNETIX-jälleenmyyjäsi:

